



## 智能大小便護理儀

Intelligent Defecation Nursing Instrument



自動感應 | 自動收集 | 自動沖洗 | 自動烘乾

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.

節亮康復產品有限公司

Your Smart Health Care Solution Partners

## 智能大小便護理儀

Intelligent Defecation Nursing Instrument

自動感應 自動收集 自動沖洗 自動烘乾



### 適用範圍

適用於：術後臥床病人、傷殘或癱瘓人士、臥床老人等。

應用於：家庭、養老院、醫院、康復中心等。

## 產品概述

- 當使用者排出大小便時，儀器的臥便器自動感知，主機立即啟動抽取大小便並存儲在汙物桶內，大小便結束後，潔淨的溫水自動噴出，沖洗使用者的隱私部位和集便器內部，沖洗結束後立即進行暖風烘乾。
- 整個過程為智能化全自動運行，護理人員無需操作，不用接觸汙物。

## 三大顯著價值

- 臥床人士的健康福音**  
自動智能化控制更方便，通風透氣效果好利於健康，清潔及時性強更舒適，避免倫理尷尬增加自信心。
- 護理人員的特別助手**  
免除傳統護理的繁瑣與勞累，穩定護理人員心態，傳承孝心避免遺憾。
- 養老機構的無憂使者**  
節約護工成本免招工難，適應變化增強管理穩定性，智能化設備提升護理檔次。

## 產品結構



主機

臥便器

專用床墊



主機

專用床墊

臥便器

## 主機




### 產品規格

主機尺寸:80cm\*60cm\*65cm 主機淨重:35kg  
水箱容量:清水桶6000ml 汙水桶:7000ml

### 產品特點

- ✦ 足夠容積的水箱，保障正常使用時一天以上的水量。
- ✦ 特設的消除臭味功能，保障使用環境的空氣清新。
- ✦ 特設的消除噪音功能，保障使用環境的舒適安靜。

## 臥便器

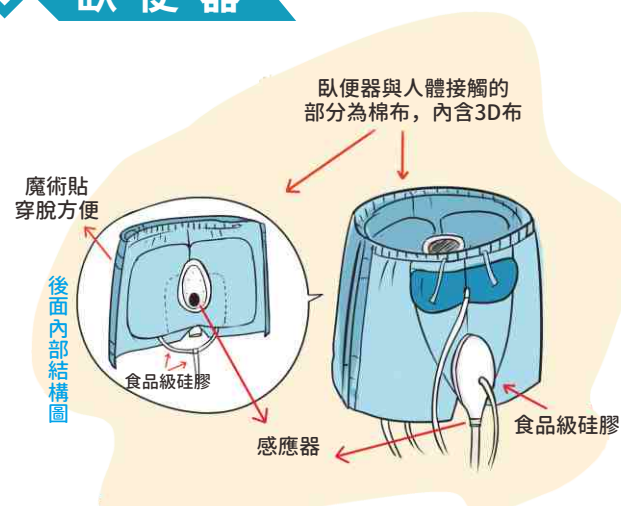


### 產品材質

臥便器主要材料為純棉布，內含3D布、高級工程塑膠大便門、食品級矽膠小便門。

### 產品特點

- ✦ 自動感應、收集、沖洗、烘乾功能實現的載體。
- ✦ 舒適，通風透氣且防滲漏。

## 專用床墊

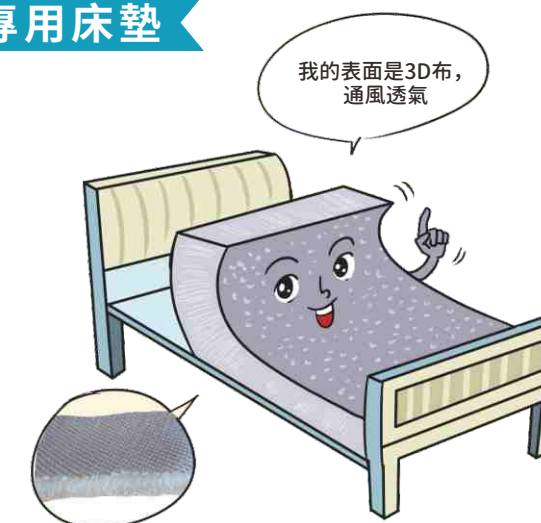

### 產品材質

上層為三明治布和3D布，中、下層為環保棕墊和海綿。

### 產品特點

- ✦ 專用床墊，可配合護理床實現翻身、起背抬腿、落腿等，透氣、保暖，減少褥瘡的發生。
- ✦ 舒適，通風透氣且防滲漏。



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.  
節亮康護產品有限公司

+852 3974 5593 www.ziglite.com  
+852 6756 7703 info@ziglite.com  
+852 3544 0462

香港辦事處：  
香港新界荃灣沙咀道364-366號，萬象工業大廈18/F B3室  
辦公時間：9:30am - 5:30pm

Office Address  
Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road,  
Tsuen Wan, Hong Kong  
Office Hour: Mon - Fri: 9:30 - 5:30pm



## 《 工作設置 》



### ◆ 模式選擇


#### ● 選擇自動或手動功能

**手動:**使用者意識清醒,可自行感知大小便,選擇手動功能,就像自己可以上廁所

**自動:**使用者不能自己感知大小便,選擇自動功能,大小便排出時儀器自動感應

## 待機狀態


### 待機就緒

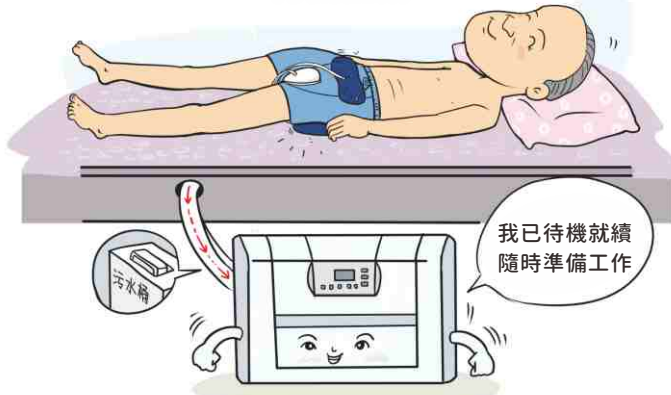

### 特點

- ♥ 各部件與主機連接完畢;
- ♥ 大小便門與人體皮膚不緊密接觸,屬透氣狀態。


## 自動收集

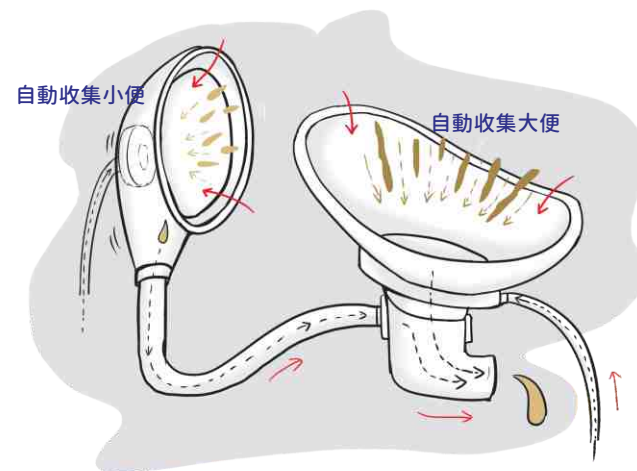

### 特點

- ♥ 大小便門與人體緊密接觸的同時,主機開始進行大小便的收集工作,將收集到的大小便自動運送到主機污水桶內。
- ♥ 在正常情況下,淨水桶和污水桶可滿足一天的使用量,減少了護理工作量。

## 自動烘乾

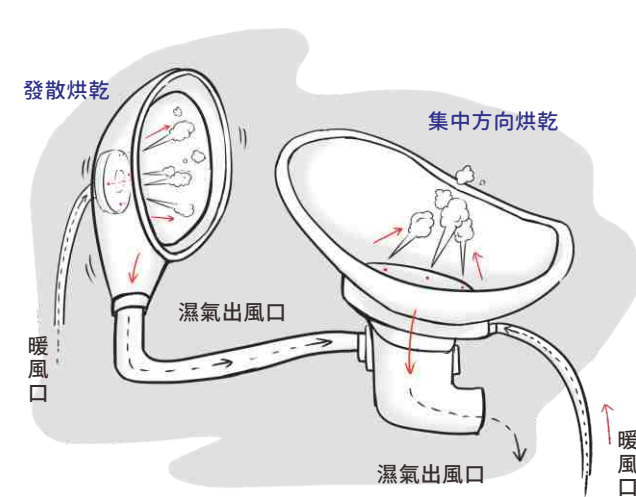

### 特點

- ♥ 沖洗完成後,烘乾系統對使用者隱私部位進行烘乾。
- ♥ 噴出的熱氣具有溫度調節功能,可根據使用者的需求設置合適的溫度範圍。
- ♥ 工作完成後自動進入待機狀態。

1

3

2

4

5



### ◆ 參數設置



### 參數範圍

- 大便時間:180-1800s
- 小便時間:30-180s
- 沖洗水溫:34-39°C
- 小便負壓:1-3檔
- 語音音量:1-5級
- 大便沖洗:8-20s
- 小便沖洗:4-10s
- 烘乾氣溫:40-55°C
- 大便負壓:3-5檔
- 大便烘乾:120-300S
- 小便烘乾:0-1200S


## 自動感應

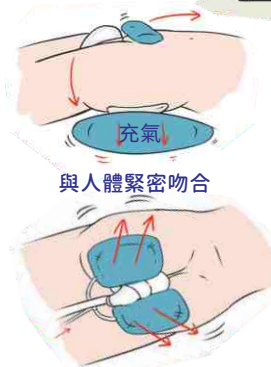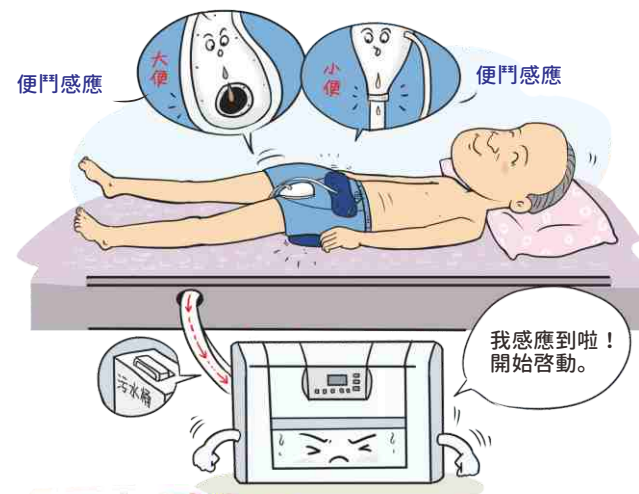

### 特點

- ♥ 在有大小便時,感應器第一時間自動感知,護理儀從待命狀態進入工作模式。
- ♥ 感應啟動後,立即與人體緊密吻合,防滲漏。

## 自動沖洗

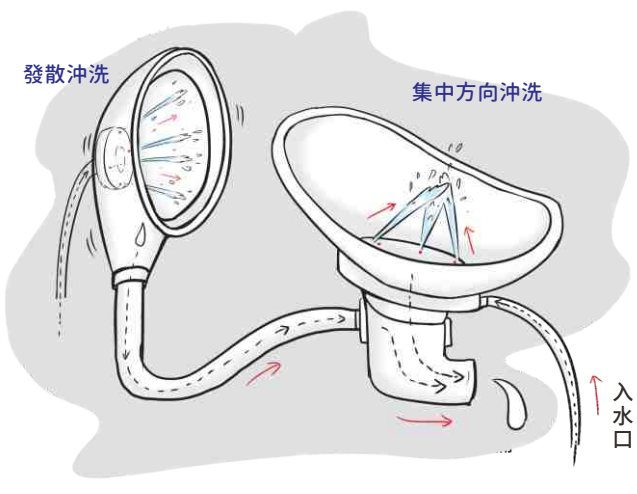

### 特點

- ♥ 在收集完成後,迅速進入沖洗環節,乾淨溫水通過噴嘴對集便器內部和使用者隱私部位進行清潔。
- ♥ 特點:淨水箱具有加溫和保溫功能,可根據使用者的需求設置合適的水溫範圍。



使用前



使用後